

BANDAGEM COMPRESSIVA MULTICOMPONENTE

UrgoK2 é uma terapia multicomponente composta por bandagens compressivas ativas, sendo de curto e longo estiramento, quando aplicado uma sob a outra, oferecendo em repouso ou exercício a pressão média ideal de 40mmHg recomendada para o tratamento da úlcera venosa.



Marcadores elípticos em ambas bandagens



KTech

1

Bandagem compressiva de curto estiramento

- 80% de pressão (32mmHg);
- Mantém a pressão de trabalho;
- Contribui para o conforto do paciente;
- Capacidade de absorção;
- Distribui a pressão e protege as proeminências ósseas;
- Auxilia na função de bomba da panturrilha e na contenção do edema.



KPress

2

Bandagem compressiva de longo estiramento

- 20% de pressão (8mmHg);
- Pressão moderada em repouso;
- Bandagem coesiva e autoaderente.

#COMURGOCICATRIZA

Modo de ação

UrgoK2 atua na compressão de forma contínua, consistente e confortável.



KTech exerce efeito massagador quando o paciente está em movimento, melhorando o retorno venoso e reduzindo o edema.

KPress adapta-se na perna do paciente e ao edema. Em repouso, a pressão terapêutica se mantém de maneira ideal, segura e confiável.



Indicação

Para o tratamento da úlcera venosa e edema.

Aplicação



Aplique o curativo primário adequado, antes de aplicar o UrgoK2.

1. Meça a circunferência do tornozelo 2cm acima do maléolo e selecione o tamanho adequado.

2. Comece aplicando a KTech. Faça o estiramento correto até a formação de um círculo.



3. Realizar a sobreposição correta cobrindo o círculo de acordo com a imagem.



4. Faça a sobreposição aplicando a Bandagem KPRESS cobrindo a base do círculo anterior. Na última sobreposição, aplique novamente a bandagem para se auto aderir 100% na sua fixação.



Frequência de troca


UrgoK2 deve permanecer na perna até a próxima troca de curativo ou por no máximo 7 dias.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
SAC: (12) 3202-1300 / sac@br.urgo.com

URGOK2 TEM RESPALDO DOS MAIS ALTOS NÍVEIS DE EVIDÊNCIAS


Compressão contínua sustentada: Otimização entre pressão de trabalho e repouso

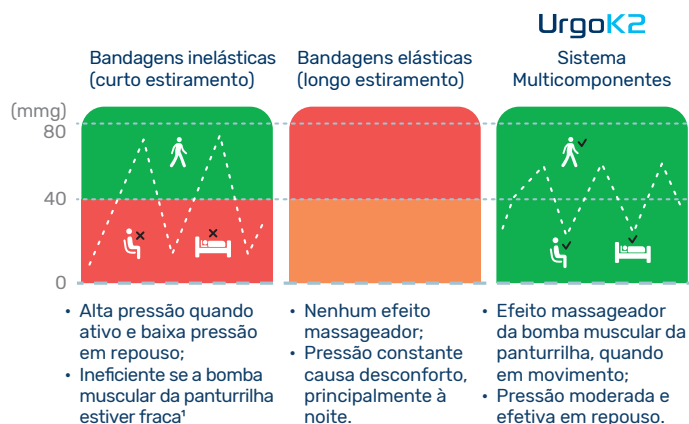

Produto	Tamanho	Código
UrgoK2	18x25cm	602190
UrgoK2	25x32cm	602191



Escaneie o QR Code e tenha acesso aos vídeos sobre UrgoK2

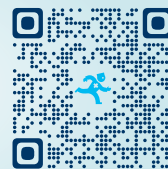

Referências: 1. these bandage cannot perform properly if the calf muscle pump is weak or ineffective. Understanding Compression Therapy; EWMA Position Document 2003- p14 2. European Wound Management Association (EWMA). Management of Patients With Venous Leg Ulcers: Challenges and Current Best Practice. J Wound Care. 2016 Jun; 25 Suppl 6:S1-S67. 2. O'Meara S. et al. Compression for venous leg ulcers (review). The Cochrane database of systematic reviews 2012; 1-192. 3. Young T, et al. UrgoK2® Compression Bandage System made easy. Wounds Int. 2013;4:1-6. 4. Junger M, et al. Comparison of interface pressures of three compression bandaging systems used on healthy volunteers. J Wound Care. 2009; 18(11):474-80. 5. Benigni JP, Lazareth I, Parpex P, et al. Efficacy, safety and acceptability of a new two-layer bandage system for venous leg ulcers. J Wound Care. 2007;16(9):385-90. 6. Hanna R, Böhbot S, Connolly N. A comparison of interface pressures of three compression bandage systems. Br J Nurs. 2008;17(20):S16-24. 7. Stücker, M., Mütter, K., Erfurt-Berge, C., Lützkendorf, S., Eder, S., Möller, U. and Dissemmond, J., 2021. Multicomponent compression system use in patients with chronic venous insufficiency: a real-life prospective study. Journal of Wound Care. 30(5), pp.400-412. 8. Crebassa, V. (2022). "Úlcères de Jambes Veineux traités en ville par un système de compression multitypes en 'tre intention'." JMV-Journal de Médecine Vasculaire, 47.



/urgomedicalbrasil
urgomedical.com.br

URGO
MEDICAL
Healing people®